

Tastaturbedienung zur effizienten Bedienung von Vetera

Vetera lässt sich vollständig allein mit der Maus bedienen. Wirklich schnell in der Bedienung ist man damit jedoch nicht. In den folgenden 3 Kapiteln möchten wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern zeigen, wie Sie mit wenigen Tastenkürzeln in Ergänzung zur Maus die Effizienz und Geschwindigkeit der Einträge spürbar verbessern können.

Navigation zu den entsprechenden Programmteilen über die ALT-Taste


Die generelle Windows-Tastatur-Bedienung ist auch im Vetera möglich. So sparen Sie täglich viele Klicks. Halten Sie bitte einmal die ALT-Taste fest und achten Sie auf die Menüs in Vetera. Sie werden die **unterstrichenen Buchstaben in den Menüzeilen und Untermenüs** entdecken.

Um diese Menüs nun mit der Tastatur anzusteuern, halten Sie die ALT-Taste fest und suchen den nächsten, unterstrichen Buchstaben

Bei Programm das „**P**“ – bei Besuche das „**B**“ – Extras das „**E**“ usw.

Auch in den dann weiter aufklappenden Untermenüs finden Sie diese Buchstaben. Beim Navigieren halten Sie bitte die **ALT-Taste auf Ihrer Tastatur weiter fest und** nutzen die **jeweiligen Buchstaben** Ihrer Tastatur.

Um also schneller beispielsweise in die Artikelverwaltung zu gelangen ist die Tastatur-Kombination: **ALT-P-S-A**.

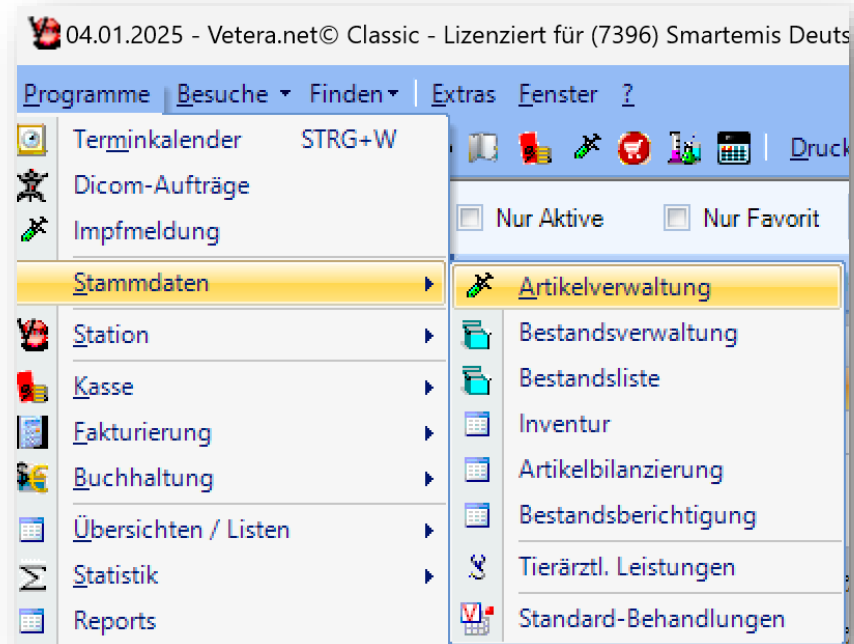

Verwendung wichtiger Tastenkürzel

Vetera ist als typischen Windows-Programm oftmals mit den gleichen Tastenkürzeln ausgestattet, wie Sie sie vielleicht auch aus der Bedienung von Office-Produkten kennen. Beispielsweise können Sie mit der Tabulatortaste spielend leicht ohne Maus in das nächste Feld springen, mit „Shift & Tab“ kommen Sie wieder in das vorherige Feld zurück. Weitere nützliche Tastenkürzel sind nachfolgend genannt.

Programm	Taste/n-Kombination	Funktion
Alle Windows® Programme	[TAB]	Cursor springt in das nächste Feld
	[SHIFT] + [TAB]	Cursor springt in das vorherige Feld
	[STRG] + [A]	Alles markieren (gesamter Text des Dokuments)
	[STRG] + [C]	Kopiert den markierten Text in die Zwischenablage
	[STRG] + [V]	Fügt den kopierten Inhalt an die Stelle des Cursor
	[STRG] + [X]	Schneidet den markierten Text aus und fügt ihn in die Zwischenablage
	[F10]	Menüleiste aktivieren

Vetera	Taste/n-Kombination	Funktion
Alle Vetera Programme	[F1]	Diese Vetera®.net – Hilfe
	[STRG] + [K]	Neueintrag für Besuche – Kleintiere
	[STRG] + [G]	Neueintrag für Besuche – Großtiere
	[F4]	Öffnet die Auswahlliste des aktuellen Feldes
	[STRG] + [F2]	Direktverkauf öffnen
	[STRG] + [E]	Einstellungen öffnen
	[STRG] + [Tabulatortaste]	Wechsel zu den geparkten Programmen
	[ALT] + [F4]	Vetera®.net schließen
	[ALT] + [T]	Öffnen des Fensters ‚Todo‘
Kartei	[STRG] + [N]	Neuen Kunden/Patienten anlegen
	[STRG] + [S]	Neuen Kunden/Patienten speichern
Labor	[STRG] + [P]	Drucken der Auftragsliste
	[STRG] + [G]	Laborgeräteauswahl und Konfiguration
	[STRG] + [U]	Informationen über das Programm
Behandlung	[F8]	Ändert die Einheit eines

Behandlungskartei: Eingabefenster LEI + MED, Cursor in Feld Einheit		ausgewählten Medikaments (von ml in Pck und umgekehrt)
Behandlungskartei: Cursor im Eingabefenster Diagnose bzw. Anamnese	[STRG] + [Leertaste]	Anzeige gespeicherter Textbausteine
Behandlungskartei: Cursor im Eingabefenster für die Leistungseingabe	[STRG] + [A]	Anzeige der Leistungen, Medikamente und Standardbehandlungen
	[STRG] + [L]	Nur Anzeige der Leistungen
	[STRG] + [M]	Nur Anzeige der Medikamente
	[STRG] + [Y]	Nur Anzeige der Standardbehandlungen



1 = Tabulatortaste	2 = Cap Lock	3 = Shift-Taste	4 = Steuerungstaste
5 = Leertaste	6 = Alt-Taste	7 = Alt Graphic-Taste	8 = Enter-Taste

Video zur Verwendung der Tastenkürzel von der Kundenerfassung bis zum Kassivorgang

Durch Einscannen oder Anklicken dieses QR-Codes können Sie den roten Faden von der Neukundenerfassung bis zum Abschluss des Kassivorgangs allein durch die Tastaturbedienung verfolgen.



[Online-Gesprächstermin direkt mit dem Smartemis IT-Team vereinbaren](#)